


Aanleggen van een sling voor een passieve tillift in lig



Zet het bed op de juiste hoogte en het bedhek aan de andere zijde omhoog. Controleer de maat van de sling en sta in schrede- of spreidstand. Steun tegen het bed. Vraag de cliënt van je af te kantelen of help hem daarbij. Leg de helft van de sling op de goede hoogte op bed en stop de andere helft met je vlakke hand rustig onder de cliënt, voor zover dat lukt. Oefen geen kracht uit en ga weer recht staan.

Je kunt ook naar je toe kantelen, maar dan sta je wel verder voorovergebogen.

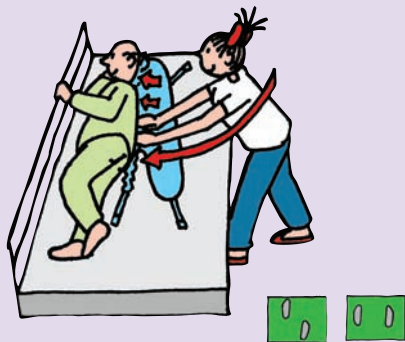

Ga nu in spreidstand staan, steunend tegen het bed. Laat de cliënt met je handen mee terug op zijn rug rollen en beweeg zelf mee, maar trek niet. Blijf niet in die houding staan of plaats, als het iets langer duurt, een knie in bed. Doe het bedhek omhoog en loop om. 'Friemel' nu rustig de sling aan de andere zijde onder de cliënt vandaan of laat hem lichtjes de andere kant op kantelen. De cliënt kan ook naar je toe kantelen, maar dan moet je wel verder reiken.



Breng de lift dichtbij. Pas op voor het tiljuk en de haken van de lift. Haak eerst de verste, bovenste clip aan en dan de andere bovenste clip. Controleer of ze goed vastzitten. Sjør niet. Laat zonodig de lift verder zakken of het hoofdeinde van het bed omhoog komen. Plaats indien nodig een knie in bed of steun af met je buik of bekken. Loop dan om, kantel zonodig het juk een beetje of laat de lift zakken en haak clip 3 aan. Werk altijd dichtbij jezelf en loop dus weer terug voor clip 4.

Sjør nooit aan clips of lussen, controleer altijd of alles goed zit, ook door de lift altijd eerst een klein stukje omhoog te laten komen, voordat je verder gaat!



Deels

Disciplineren • Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever, stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Oriëntants de informatie in deze uitgave zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave.

- Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek, bekijk de filmpjes op www.goedgebruik.nl en oefen!
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
- Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.

2.2.2.

