

Van lig naar lig met glijzeil/-rol (duwend)




Zorg voor een glijzeil waar de cliënt van top tot teen op komt te liggen.


Rijd de brancard zijdelings tegen het bed aan en voer alle veiligheidsmaatregelen uit (zie 4.1.).



Leg de cliënt alles uit en geef aan hoe hij mee kan werken. Zet het bed op de juiste werkhoogte, zet het bedhek aan de verre kant omhoog en breng het glijzeil aan (zie 1.1.1., 1.1.3. of 1.1.5). Leg het glijzeil niet te ver onder de cliënt om straks nog de transfer te kunnen maken, maar zorg wel dat het goed onder heupen en schouders komt.

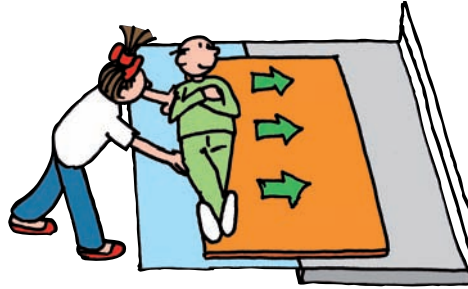

Controleer de remmen! Vraag de cliënt zijn hoofd vast in de juiste richting te leggen en help met een kussen zodat het hoofd van de cliënt rustig verplaatst wordt. Ga in schrede stand staan en duw met grotendeels gestrekte armen. Maak daarbij gebruik van je lichaamsgewicht: daar moet de kracht vandaan komen. Duw de cliënt rustig en beetje bij beetje naar de andere zijde. Geef afwisselend druk op de heupen, de schouders en de benen. Duw met volle handen ('prik' niet) en zorg dat de cliënt niet in een kronkel komt te liggen. Houd zoveel mogelijk oogcontact.

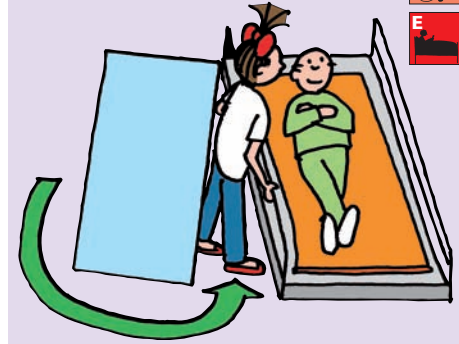

Haal bed of brancard weg, en zet meteen de bed- en/of brancardhekken omhoog. Verwijder daarna pas het glijzeil (zie 1.1.2. of 1.1.4.) en controleer of de cliënt weer prettig ligt.



Discriminerend: Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Oriëntants de informatie in deze uitgave zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave.

- Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek, bekijk de filmpjes op www.goedgebruik.nl en oefen!
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
- Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.