





Tot zit brengen obese cliënt met behulp van plafondlift

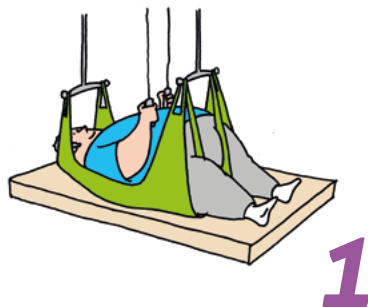


Het in bed tot zit brengen van een obese cliënt kan zwaar zijn, voor jou en de cliënt.

Glijzeilen in combinatie met de motor van het bed zijn dan niet altijd afdoende. Ook kan de cliënt bij het tot zit komen ademhalingsproblemen krijgen, omdat hij door het bed 'in elkaar gedrukt' wordt.

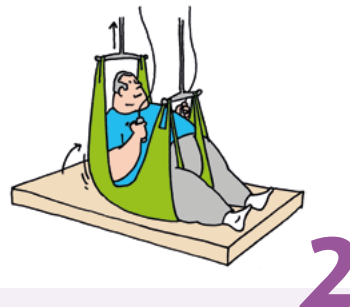

Met een tweemotorige plafondlift (twee plafondliften (motoren of cassettes) die aan één rail zijn bevestigd) kan je de obese cliënt tot zit brengen en eventueel verplaatsen in bed. Als de cliënt in de lucht hangt kun je hem makkelijk op de gewenste plaats duwen. Er is wel een speciale tilband nodig die je kunt laten liggen (een 'verblijfsband').

De motoren kunnen onafhankelijk van elkaar bediend worden zodat er ruimte voor de buik blijft en de cliënt minder kans loopt op benauwdheid, ook door de houding in de 'lucht' te variëren.

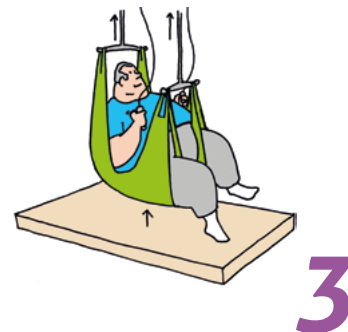

Bij cliënten zonder extreem overgewicht is het stimuleren van zelfredzaamheid erg belangrijk. Bij obese cliënten is dat zo mogelijk nog belangrijker. Geef de cliënt zo veel mogelijk de regie over de handeling, in dit geval door de cliënt de afstandsbediening van de lift in handen te geven.

Voorkom dat er na afloop restspanning of druk blijft bestaan bij de cliënt. Wiebel heen en weer of til arm of been even lichtjes op en vergroot het contactoppervlak.

